

EN - Keep out of reach of children  
DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren  
FR - Tenir hors de portée des enfants  
NL - Buiten bereik van kinderen houden  
IT - Tenere fuori dalla portata dei bambini  
ES - Manténgase fuera del alcance de los niños  
PT - Manter fora do alcance das crianças  
SE - Förraras utom räckhåll för barn  
DA - Opbevares utilgængelig for børn  
FI - Pidettävä poissa lasten ulottuvilta  
EL - Φυλάξτε μακριά τα παιδιά



U.S. Patents: 5,575,654; 5,863,202; 7,040,897; 7,056,118; 7,059,857; and 7,059,858; 7,568,579;  
7,625,210. Australia Patents: 654955 and 2004243104.  
Other U.S and International patents pending.

# UltraEZ<sup>®</sup> Flor-Opal<sup>®</sup>

EN- Tooth Desensitizing agents  
DE - Zahndesensibilisierungsmittel  
FR - Agents de désensibilisation des dents  
NL - Tanddesensitisiemiddelen  
IT - Agenti di desensibilizzazione dentaria  
ES - Agentes desensibilizadores para los dientes  
PT - Agentes de dessensibilização dentária  
SV - Medel för desensibilisering av tänder  
DA - Desensibiliserende midler til tænder  
FI - Hampaiden arkuutta vähentävät aineosat  
EL - Ουσίες απευαισθητοποίησης των δοντιών

800.552.5512 [ULTRADENT.COM](http://ULTRADENT.COM)

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

EN DE FR NL IT ES PT SE DA FI EL

© Copyright 2010 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.  
Manufactured by Ultradent Products, Inc. Made in USA  
505 West 10200 South, South Jordan, Utah 84095 41300.11 102010

# UltraEZ

## EN-Description:

UltraEZ<sup>®</sup> is a unique, sustained release, 3% potassium nitrate and 0.11% weight by weight fluoride ion, sticky, viscous gel. UltraEZ is designed to be used in a custom-fabricated tray.

## DE-Beschreibung:

UltraEZ<sup>®</sup> ist ein einzigartiges, klebriges, dickflüssiges Gel aus 3%igem Kaliumnitrat mit 0,11% Fluoridionmassenanteil und nachhaltiger Wirkstofffreisetzung. UltraEZ wurde für die Anwendung in einer speziell angefertigten Schiene entwickelt.

## FR-Description:

UltraEZ<sup>®</sup> est un gel collant et visqueux unique à libération prolongée, au nitrate de potassium 3% et a une teneur poids pour poids de 0,11% d'ions fluorure. UltraEZ est conçu pour être utilisé dans un porte-empreinte fait sur mesure.

## NL-Beschrijving:

UltraEZ<sup>®</sup> is een unieke, voor langdurige afgifte bestemde, plakkerige en visceuze gel bestaande uit 3% kaliumnitraat en 0,11% fluoride in gewichtsprocent. UltraEZ dient te worden gebruikt in een speciaal daarvoor gemaakte lepel.

## IT-Descrizione:

UltraEZ<sup>®</sup> è un gel unico, viscoso, appiccicoso, a rilascio sostenuto, 3% nitrato di potassio e 0,11% peso per peso ione di fluoruro. UltraEZ è creato per essere usato in un vassoio apposito.

## ES-Descripción:

UltraEZ<sup>®</sup> es un gel exclusivo, pegajoso y viscoso, con liberación sostenida de 3 % de nitrato de potasio y 0,11% w/w de iones de flúor. Ha sido formulado para ser utilizado en una cubeta fabricada a medida.

## PT-Descrição:

UltraEZ<sup>®</sup> é um gel adesivo viscoso único, de libertação controlada, 3% de nitrato de potássio e ião de fluoreto 0,11% peso por peso. UltraEZ foi concebido para ser utilizado numa moldeira feita à medida.

## SE-Beskrivning:

UltraEZ<sup>®</sup> är en unik, kläbande, tjockflytande viskös gel med långsam frisättning, som innehåller 3 viktprocent kalium och 0,11 viktprocent fluoridjoner. UltraEZ är avsedd att användas i ett för varje patient specialtillverkat avtryck.

## DA-Beskrivelse:

UltraEZ<sup>®</sup> er en unik, klæbende, viskøs gel med 3 vægtprocent kaliumnitrat og 0,11 vægtprocent fluoridion med depotvirkning. UltraEZ er fremstillet til anvendelse i en individuel ske.

## FI-Kuvaus:

UltraEZ<sup>®</sup> on ainutlaatuinen, hitaasti luovuttava, 3 painoprosenttia kaliumnitraattia ja 0,11 painoprosenttia fluori-ioneja sisältävä, tahmea, viskoosinen geeli. UltraEZ on suunniteltu käytettäväksi henkilökohtaisen erikoisvalmistetun valkaisulusikan kanssa.

## EL-Περιγραφή:

Το UltraEZ<sup>®</sup> είναι ένα μοναδικό, κολλώδες, ιξώδες ζελέ ελεγχόμενης έκλυσης από νιτρικό κάλιο 3% και φθόριο 0,11% κατά βάρος. Το UltraEZ έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δίσκο κατασκευασμένο κατά παραγγελία.

## EN-Indications:

UltraEZ Desensitizing Gel provides a film-like varnish for sensitive teeth, sealing dentinal tubules of exposed dentin and other areas where post-operative sensitivity is a concern. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment of dentin sensitivity.

## DE-Indikationen:

UltraEZ Desensitizing Gel wirkt wie ein Versiegelungslack für empfindliche Zähne und versiegelt in freiliegenden Dentinbereichen Dentinkanäle und andere Bereiche, wo nach einer zahnärztlichen Behandlung Zahnempfindlichkeiten auftreten. Dieses Produkt kann entweder in der Zahnarztpraxis oder vom Patienten selbst zur Behandlung von Zahnempfindlichkeiten verabreicht werden.

**FR-Indications:**

Le gel désensibilisant UltraEZ forme un film ressemblant à un vernis sur les dents sensibles, qui scelle les canalicules dentinaires de la dentine exposée et des autres zones dans le cas d'un problème de sensibilité post-opératoire. Ce produit est utilisé en cabinet par un professionnel dentaire ou fournit au patient pour un traitement à domicile de la sensibilité dentinaire.

**NL-Indicaties:**

UltraEZ Desensitizing Gel (ongevoelig makende gel) vormt een filmachtige laklaag over gevoelige tanden, waarbij de dentinekanaaltjes van de blootgestelde dentine en andere plaatsen waar postoperatieve gevoeligheid voor problemen zorgt, worden afgesloten. Het product moet worden gebruikt door een tandheekkundige specialist in de praktijk of verstrekt aan de patiënt om gevoelige dentine thuis te behandelen.

**IT-Indicazioni:**

Il Gel desensibilizzante UltraEZ fornisce una vernice tipo pellicola per i denti sensibili, che chiude le tubule dentinali di dentina esposta e le altre aree dove la sensibilità post operativa è un problema. Il prodotto viene usato sia da un dentista nel suo studio che fornito per il trattamento a casa della sensibilità della dentina.

**ES-Indicaciones:**

El Gel Desensibilizante UltraEZ proporciona un barniz en forma de película para dientes sensibles, sellando los túbulos dentinarios de la dentina expuesta y de otras zonas donde la sensibilidad post-operatoria es problemática. El producto puede ser utilizado profesionalmente en el consultorio dental o ser entregado al paciente para tratamiento domiciliario de la sensibilidad dental.

**PT-Instruções:**

O gel UltraEZ Dessensibilizante proporciona um verniz em forma de película para dentes sensíveis, selando túbulos dentinários de áreas de dentina expostas e outras áreas onde a sensibilidade pós-operatória é uma preocupação. O produto é utilizado por profissionais dentários no consultório ou entregue ao paciente para o tratamento domiciliário da sensibilidade dentinária.

**SE-Indikationer:**

UltraEZ Desensitizing Gel lägger en filmliknande beläggning på känsliga tänder. Den täcker dentinkanalerna i exponerat dentin och andra områden där postoperativ känslighet är ett problem. Produkten används antingen av en tandvårdare på mottagningen eller ges till patienten för behandling av dentinkänslighet hemma.

**DA-Indikationer:**

UltraEZ desensibiliseringsgel er en film lignende lak til følsomme tænder, som forsegler dentinkanalerne i områder, der enten er blottede postoperativt eller udviser anden postoperativ dentinfølsomhed. Produktet anvendes enten på tandklinikken eller udleveres til patienten til hjemmebehandling af dentinfølsomhed.

**FI-Käyttöaiheet:**

UltraEZ Desensitizing Gel -arkuutta vähentävä geeli on kalvon muodostava lakka, joka sulkee paljastuneen dentiinin tubulukset ja muut alueet, joissa ilmenee toimenpiteen jälkeistä arkuutta. Tuotetta käyttää joko hammashoidon ammattilainen vastaanotollaan tai annetaan potilaalle hammasluun herkistymisenhoitoon kotona.

**EL-Ενδείξεις:**

Το Ζελέ Εξουδετέρωσης UltraEZ παρέχει ένα βερνίκι σε μεμβράνη για ευαίσθητα δόντια, σφραγίζοντας οδοντινοσωληνάκια εκτεθειμένης οδοντίνης και άλλες περιοχές όπου η ευαισθησία μετά την επέμβαση αποτελεί πρόβλημα. Το προϊόν χρησιμοποιείται είτε από οδοντίατρο στο ιατρείο ή παρέχεται στον ασθενή για θεραπεία της ευαισθησίας οδοντίνης κατ' οίκον.

**For product MSDS please see our website: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)**

# Flor-Opal

## EN-Description:

Flor-Opal<sup>®</sup> is a unique, sustained-release, 0.5% fluoride ion in a sticky, viscous gel to be used with a custom tray. Flor-Opal is a clear, nearly tasteless, high-viscosity sticky gel with a pH of ~6.5.

## DE-Beschreibung:

Flor-Opal<sup>®</sup> ist eine einzigartige Mischung von 0,5% Fluoridionen in einem klebrigen, viskosen Gel mit Depoteffekt, die mit einer speziell dafür hergestellten Schale angewendet wird. Flor-Opal ist ein klares, fast geschmackloses klebriges Gel mit hoher Viskosität und einem pH-Wert von ca. 6,5.

## FR-Description:

Flor-Opal<sup>®</sup> est un gel collant, visqueux unique à libération prolongée, au fluorure 0,5% conçu pour une utilisation en porte-empreinte sur mesure. Flor-Opal est un gel collant, transparent, pratiquement sans goût, à haute viscosité et ayant un pH de ~6,5.

## NL-Beschrijving:

Flor-Opal<sup>®</sup> is een uniek, voor langdurige afgifte bestemd 0,5% fluoride-ion in een plakkerige, viskeuze gel die wordt gebruikt in combinatie met een speciaal gemaakte tray. Flor-Opal is een transparante, bijna smaakloze, hoog viskeuze plakkerige gel met een pH van ~6.5.

## IT-Descrizione:

Flor-Opal<sup>®</sup> è un gel ione di fluoruro 0,5% unico, a rilascio regolare, appiccicoso e viscoso da usare con un vassoio apposito. Flor-Opal è un gel trasparente, quasi senza sapore, ad alta viscosità con un pH di ~6,5.

## ES-Descripción:

Flor-Opal<sup>®</sup> es un gel exclusivo, de liberación sostenida, de 0,5% de iones de flúor en un gel pegajoso y viscoso a ser utilizado con una cubeta a medida. Flor-Opal es un gel claro, casi sin sabor, pegajoso y de alta viscosidad con un pH de ~6.5.

## PT-Descrição:

Flor-Opal<sup>®</sup> é um ião de fluoreto 0,5% de libertação controlada único num gel adesivo e viscoso para ser utilizado com uma moldeira personalizada. Flor-Opal é um gel adesivo de elevada viscosidade transparente, quase sem sabor com um pH de ~6,5.

## SE-Beskrivning:

Flor-Opal<sup>®</sup> är en unik, 0,5 % fluoridjon som frigörs långsamt (sustained-release), i en klibbig, trögflytande gel för användning i en specialtillverkad sked. Flor-Opal är en klar, nästan smakfri, mycket trögflytande klibbig gel med pH-värdet ~6,5.

## DA-Beskrivelse:

Flor-Opal<sup>®</sup> er en unik, klæbende, viskøs gel med 0,5 procent fluoridion med depotvirkning beregnet til anvendelse i individuelle skeer. Flor-Opal er en klar, næsten smagsfri gel, der er højviskøs og klæbende med en pH på ~6,5.

## FI-Kuvaus:

Flor-Opal<sup>®</sup> on ainutlaatuinen tahmea viskoosinen depotgeeli, joka sisältää 0,5 % fluoridi-ioneja. Geeliä voidaan käyttää yksilöllisesti valmistetun hoitolusikan kanssa. Flor-Opal on kirkas, lähes mauton, erittäin viskoosinen geeli, jonka pH on 6,5.

## EL-Περιγραφή:

Το Flor-Opal<sup>®</sup> είναι ένα μοναδικό φθοριούχο ιόν 0,5% ελεγχόμενης έκλυσης σε κολλητικό, ιξώδες τζελ για χρήση με εξατομικευμένο δίσκο. Το Flor-Opal είναι ένα διαυγές, άγευστο σχεδόν, υψηλού ιξώδους κολλητικό τζελ με pH ~6,5.

## EN-Indications:

Flor-Opal is designed for use whenever topical fluoride application is desired via take-home tray (e.g., prevention of root caries, treatment of periodontal conditions, following bleaching procedures, root sensitivity).

## DE-Indikationen:

Flor-Opal ist immer dann indiziert, wenn ein topischer Fluorid Auftrag über eine mit nach Hause gegebene Schale (z.B. zur Verhinderung von Zahnhalskaries, zur Behandlung von Parodontalerkrankungen, nach Zahnweißverfahren, bei Wurzelempfindlichkeit) gewünscht wird.

**FR-Indications:**

Flor-Opal est conçu pour être utilisé lorsqu'une application de fluorure à usage local est souhaitée dans un porte-empreinte à domicile (par ex. pour les caries des racines, le traitement des lésions parodontales, à la suite de procédures de blanchiment, sensibilité des racines).

**NL-Indicaties:**

Flor-Opal is bestemd voor alle plaatselijke fluoridetoepassingen waarbij trays thuis moeten worden gebruikt (bijv. voorkomen van wortelcariës, behandeling van parodontale condities, na bleekprocedures, gevoelige tandwortels).

**IT-Indicazioni:**

Flor-Opal è adatto all'uso quando sia necessaria un'applicazione topica di fluoruro mediante un vassoio da usare a casa (per es. per la prevenzione di carie delle radici, per il trattamento di problemi periodontici, a seguito di procedure di sbiancamento dei denti, o qualora sia presente una sensibilità delle radici).

**ES-Indicaciones:**

Flor-Opal está diseñado para ser utilizado cuando se desee aplicar flúor tópicamente en forma domiciliaria con cubetas a medida (por ej. prevención de caries radicular, tratamiento de condiciones periodontales, después de tratamientos blanqueadores, sensibilidad radicular).

**PT-Instruções:**

Flor-Opal foi concebido para ser utilizado sempre que se pretender uma aplicação tópica de fluoreto através de uma moldeira de utilização em casa (por ex. para a prevenção de cáries radiculares, tratamento de doenças periodontais após procedimentos de branqueamento, sensibilidade radicular).

**SE-Indikationer:**

Flor-Opal är avsett att användas när en aktuell fluorid applikation önskas med en sked för hemmabruk, (t.ex. för förhindrande av rotkaries, behandling av parodontala tillstånd, efter blekningsbehandling, vid känsliga tandrötter).

**DA-Indikationer:**

Flor-Opal er beregnet til anvendelse ved alle topiske fluorbehandlinger i hjemmet med skeer til hjemmebrug (fx. til forebyggelse af rodkaries, ved behandling af parodontale tilstande, efter blegning, til følsomme tandhalse).

**FI-Käyttöaiheet:**

Flor-Opalin käyttöaiheita ovat fluoridin annostelu kotona hoitotilaa käyttämällä (esim. juurikarieksen ehkäisy, parodontologisten sairauksien hoito ja valkaisuun jälkeisen juuriarkuuden hoito).

**EL-Ενδείξεις:**

Το Flor-Opal έχει σχεδιαστεί για χρήση όποτε επιθυμείται η τοπική εφαρμογή φθοριούχου άλατος μέσω δίσκου κατ' οίκον (π.χ., για αποτροπή της τερηδόνας, θεραπεία περιοδοντικών καταστάσεων, μετά από διαδικασίες λεύκανσης, όταν υπάρχει ευαισθησία στις ρίζες).



Center tray on arch.



Lightly press into place.



Remove outer tray.



After placing tray in mouth, gently press the tray from biting surface of teeth towards the gums to ensure complete coverage of gel.



**UltraEZ** (Green Tray): Wear for 15 minutes to 1 hour per day or as directed by your dentist.

**Flor-Opal** (Blue Tray): Wear for 30 minutes to 1 1/2 hours per day or as directed by your dentist.

When finished remove tray and brush teeth.

### Precautions:

1. Keep desensitization product away from small children.
2. This product is NOT for nighttime use.
3. Do not use tobacco products or eat while using this product.
4. Not intended for use by pregnant women.
5. If any problems occur, discontinue treatment and notify your dentist.
6. Keep out of heat and/or sunlight at all times. UltraEZ and Flor-Opal may be stored at room temperature.
7. Patients should not swallow large volumes of UltraEZ or Flor-Opal gel.
8. Do not reuse to avoid cross contamination.



Einsetzen, dabei am Zahnbogen ausrichten.



Nach der Platzierung leicht andrücken.



Äußeres (Stabilisierungs-) Tray entfernen.



Nachdem Sie die Abdruckplatte in den Mund gelegt haben, drücken Sie sie vorsichtig von der Bißoberfläche der Zähne gegen das Zahnfleisch, um sicherzustellen, dass das Gel alles abdeckt.



**UltraEZ**(grüne Schiene): Täglich für 15 Minuten bis zu einer Stunde tragen, bzw. gemäß Anleitungen des Zahnarzts.  
**Flor-Opal** (blaue Schiene): Täglich 30 Minuten bis zu 1,5 Stunden tragen, bzw. gemäß Anleitungen des Zahnarzts.

Entfernen Sie danach die Schiene und putzen sich die Zähne.

## Vorsichtsmaßnahmen:

1. Desensibilisierungsmittel von kleinen Kindern fernhalten.
2. Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung über Nacht vorgesehen.
3. Während des Gebrauchs dieses Produkts keine Tabakwaren konsumieren.
4. Nicht geeignet bei Schwangerschaft.
5. Falls Probleme auftreten sollen, beenden Sie die Behandlung und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
6. Nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen. UltraEZ und Flor-Opal können bei Zimmertemperatur gelagert werden.
7. Patienten sollten keine größeren Mengen von UltraEZ oder Flor-Opal Gel schlucken.
8. Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.



Centrez le porte-  
empreinte sur la  
courbe.



Appuyez légèrement  
pour le garder en  
place.



Enlevez le porte-  
empreinte externe.



Après avoir mis le porte-  
empreinte dans la bouche,  
pressez doucement sur  
celui-ci de la surface  
occlusale vers les  
gencives pour assurer  
une couverture complète  
du gel.



**UltraEZ** (porte-empreinte vert) : A  
porter entre 15 minutes et 1 heure  
par jour ou selon les instructions de  
votre dentiste.

**Flor-Opal** (porte-empreinte bleu):  
A porter entre 30 minutes et 1  
heure et demie par jour ou selon les  
instructions de votre dentiste.

Lorsque vous avez terminé, enlevez le  
porte-empreinte et brossez-vous les dents.

## Précautions:

1. Gardez le produit de désensibilisation hors de la portée des petits enfants.
2. Ce produit N'est PAS fait pour une utilisation de nuit.
3. N'utilisez pas de produits tabagiques et ne mangez pas lors de l'utilisation de ce produit.
4. N'est pas destiné à une utilisation par des femmes enceintes.
5. Si des problèmes se produisent, arrêtez le traitement et notifiez votre dentiste.
6. A tenir éloigné de la chaleur et/ou de la lumière du soleil en tous temps.  
UltraEZ et Flor-Opal peuvent être stockés à la température ambiante.
7. Les patients ne devraient pas avaler de grandes quantités de gel UltraEZ ou Flor-Opal.
8. Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.



Centreer vorm op tandboog.



Druk voorzichtig op de juiste plaats.



Verwijder buitenste vorm.



Nadat de vorm in de mond is geplaatst, druk de vorm van het bijtoppervlak van de tanden naar het tandvlees, zodat deze helemaal door gel is bedekt.



**UltraEZ** (groene lepel): draag 15 minuten tot 1 uur per dag of zoals voorgeschreven door uw tandarts.

**Flor-Opal** (blauwe lepel): draag 30 minuten tot 1,5 uur per dag of zoals voorgeschreven door uw tandarts.

Verwijder na afloop de lepel en poets uw tanden.

## Voorzorgsmaatregelen:

1. Houd kleine kinderen uit de buurt van het desensitisatieproduct.
2. Dit product is NIET bedoeld voor nachtelijk gebruik.
3. Nuttig geen tabaksproducten of etenswaren tijdens het gebruik van dit product.
4. Niet bedoeld voor gebruik door zwangere vrouwen.
5. Als er problemen optreden, stop dan met de behandeling en informeer uw tandarts.
6. Het product mag nooit aan hitte en/of zonlicht worden blootgesteld. UltraEZ end Flor-Opal mogen worden bewaard bij kamertemperatuur.
7. Patiënten mogen geen grote hoeveelheden UltraEZ- of Flor-Opal-gel doorslikken.
8. Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.



Centrare il vassoio sull'arco.



Premere leggermente in posizione.



Levare il vassoio esterno.



Dopo aver posto il vassoio nel cavo orale, premerlo dalla superficie dei denti verso le gengive per assicurare una copertura completa del gel.



**UltraEZ** (Vassoio verde): Indossare per un periodo che va dai 15 minuti ad 1 ora al giorno o come indicato dal dentista.

**Flor-Opal** (Vassoio blu): Indossare per un periodo che va dai 30 minuti ad 1 ora e 1/2 al giorno o come indicato dal dentista.

## Precauzioni:

1. Tenere i prodotti di desensibilizzazione lontano dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto **NON** va usato durante la notte.
3. Durante l'uso di questo prodotto non usare tabacco o mangiare.
4. Non adatto all'uso durante la gravidanza.
5. Qualora si verificasse un problema, smettere il trattamento e notificare il dentista.
6. Tenere lontano da fonti di calore e/o dalla luce solare. UltraEZ e Flor-Opal possono essere conservati a temperatura ambiente.
7. I pazienti non devono ingoiare quantità eccessive del gel UltraEZ o Flor-Opal.
8. Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.

Una volta finito, levare il vassoio e lavare i denti.



Centre la cubeta en la arcada.



Presione suavemente en posición.



Retire la cubeta exterior.



Después de colocar la cubeta en boca, presione suavemente desde la superficie de mordida de los dientes hacia la encía para asegurar una cobertura completa del gel.



**UltraEZ** (Cubeta Verde): Utilice de 15 minutos a 1 hora por día, o como indicado por su dentista.  
**Flor-Opal** (Cubeta Azul): Utilice de 30 minutos a 1 1/2 hora por día, o como indicado por su dentista.

Al terminar, retire la cubeta y cepille los dientes

## Precauciones:

1. Mantenga el producto desensibilizador fuera del alcance de los niños.
2. Este producto NO es para uso nocturno.
3. No utilice productos que contengan tabaco ni coma mientras se esté utilizando este producto.
4. No se recomienda que las mujeres embarazadas lo utilicen.
5. Si se presentara algún problema, suspenda el tratamiento y consulte con su dentista.
6. Manténgalo siempre lejos del calor y/o de la luz solar. UltraEZ y Flor-Opal pueden ser guardados a temperatura ambiente.
7. Los pacientes no deben ingerir grandes cantidades del gel UltraEZ y Flor-Opal.
8. No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.



Centrar a moldeira no arco.



Pressionar ligeiramente para colocar no lugar.



Remover moldeira externa.



Depois de colocar a moldeira na boca, pressione levemente a moldeira a partir da superfície mordente dos dentes contra a gengiva para assegurar uma completa aplicação de gel.

**UltraEZ** (Moldeira verde): Use durante 15 minutos a 1 hora por dia ou conforme prescrito pelo seu dentista.


**Flor-Opal** (Moldeira azul): Durante 30 minutos a 1 1/2 hora por dia ou conforme prescrito pelo seu dentista.



Quando terminar remova a moldeira e escove os dentes.

## Precauções:

1. Mantenha o produto de dessensibilização afastado de crianças pequenas.
2. Este produto NÃO se destina à utilização durante a noite.
3. Não utilize produtos tabágicos nem coma enquanto usa este produto.
4. Não se destina à utilização por mulheres grávidas.
5. Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e avise o seu dentista.
6. Mantenha sempre afastado do calor e/ou luz solar. UltraEZ e Flor-Opal podem ser guardados à temperatura ambiente.
7. Os pacientes não devem engolir grandes quantidades de gel UltraEZ ou Flor-Opal.
8. Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.

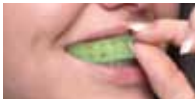

Centrera skenan på tandbågen.



Tryck varsamt skenan på plats.



Avlägsna den yttre skenan.



Efter att skenan placerats i munnen ska man försiktigt trycka skenan från tandernas tuggyta mot tandkötet för att försäkra sig om fullständig täckning av gel.

**UltraEZ** (Grönt avtryck): Använd i 15 minuter - 1 timme per dag, eller enligt din tandläkares anvisningar.

**Flor-Opal** (blått avtryck): Använd i 30 minuter - 1 1/2 timme per dag, eller enligt din tandläkares anvisningar.



Avlägsna avtrycket och borsta tänderna efter avslutad behandling.

## Försiktighetsåtgärder:

1. Förvara desensibiliseringsprodukten utom räckåll för små barn.
2. Produkten är INTE avsedd för nattligt bruk.
3. Använd inga tobaksprodukter och ät ingen mat samtidigt som du använder denna produkt.
4. Bör inte användas av gravida kvinnor.
5. Om några problem uppstår ska du avbryta behandlingen och kontakta din tandläkare.
6. Förvaras i skydd för värme och/eller solljus. UltraEZ och Flor-Opal kan förvaras i rumstemperatur.
7. Undvik att svälja större mängder av UltraEZ eller Flor-Opal gel.
8. För undvikande av korskontamination får produkten inte återanvändas.



Sæt skinnen lige ind.



Tryk den let på plads.



Tag den udvendige skinnen af.



Efter at have placeret skeen i munden trykkes den forsigtigt fra tændernes okklusalflder mod gingiva for at sikre fuldstændig dækning med gelen.



**UltraEZ** (grøn skinne):  
Bruges i 15 minutter til 1 time per dag eller som angivet af din tandlæge.

**FLOR-OPAL** (blå skinne):  
Bruges i 30 minutter til 1 1/2 time per dag eller som angivet af din tandlæge.

Skinnen skal herefter tages ud, og tænderne børstes.

## Forholdsregler:

1. Desensibiliseringsmidler skal opbevares utiligængeligt for små børn.
2. Dette produkt er IKKE beregnet til anvendelse om natten.
3. Der må hverken ryges eller spises under anvendelsen af dette produkt.
4. Ikke beregnet til anvendelse af gravide kvinder.
5. Hvis der opstår problemer, skal behandlingen afbrydes og tandlægen kontaktes.
6. Skal opbevares væk fra varme og/eller sollys. UltraEZ og Flor-Opal kan opbevares ved stuetemperatur.
7. Patienter bør ikke sluge større mængder UltraEZ eller Flor-Opal gel.
8. Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.



Aseta lusikka  
hammaskaaren  
keskelle



Paina se kevyesti  
paikalleen



Poista ulompi lusikka



Kun olet vienyt  
valkaisulusikan suuhun,  
paina lusikkaa kevyesti  
purupinnoilta ikeniä kohti  
varmistaaksesi, että geeli  
peittää hampaat kokonaan.

**UltraEZ** (vihreä lusikka): Käytä  
15-60 minuuttia päivässä, tai  
hammaslääkärisi antamien  
ohjeiden mukaan.

**Flor-Opal** (sininen lusikka):  
Käytä 30 minuuttia - 1 1/2 tuntia  
päivässä, tai hammaslääkärisi  
antamien ohjeiden mukaan.



Käsittelyn loputtua ota käsittelylusikka pois suusta  
ja harjaa hampaat.

## Varotoimia:

1. Hampaiden arkuudenhoitotuote on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta EI ole tarkoitettu käytettäväksi yön aikana.
3. Älä käytä tupakkatuotteita tai syö tämän tuotteen käytön aikana.
4. Ei ole tarkoitettu raskaana olevien naisten käyttöön.
5. Jos ilmenee ongelmia, keskeytä hoito ja ota yhteys hammaslääkäriisi.
6. Suojaa tuote aina kuumuudelta ja auringonvalolta. UltraEZ-ja Flor-Opal-tuotteita voidaan säilyttää huonelämpötilassa.
7. Suuria määriä UltraEZ-ja Flor-Opal-tuotteita ei pidä niellä.
8. Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.



Κεντράρετε το νάρθηκα στο τόξο.



Πιέστε ελαφρά για να εφαρμόσει.



Αφαιρέστε τον εξωτερικό νάρθηκα.



Μετά από την τοποθέτηση του δισκαρίου στο στόμα, πιέστε ελαφρά το δισκίο, από την μασητική επιφάνεια των δοντιών προς τα ούλα, για να διασφαλίσετε την πλήρη κάλυψη του ζελέ.



**UltraEZ** (Πράσινοι δίσκος): Φορέστε το επί 15 λεπτά έως 1 ώρα κάθε μέρα ή όπως σας δωθούν οδηγίες από τον οδοντίατρό σας.

**Flor-Opal** (Μπλε δίσκος): Φορέστε το επί 30 λεπτά έως 1 1/2 ώρα κάθε μέρα ή όπως σας δωθούν οδηγίες από τον οδοντίατρό σας.

Όταν τελειώσετε αφαιρέστε το δίσκο και βουρτσίστε τα δόντια.

## Προφυλάξεις:

1. Κρατήστε το προϊόν απευαισθητοποίησης μακριά από μικρά παιδιά.
2. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
3. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνού ή μην τρώτε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.
4. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυες γυναίκες.
5. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, διακόψτε τη θεραπεία και ενημερώστε τον οδοντίατρό σας.
6. Φυλάσσετε πάντα μακριά από θερμότητα ή/και το ηλιακό φως.  
Το UltraEZ και το Flor-Opal μπορούν να αποθηκευθούν σε θερμοκρασία δωματίου.
7. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να καταπίνουν μεγάλες ποσότητες ζελέ UltraEZ ή Flor-Opal.
8. Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωτική μόλυνση.