

# Flor-Opal®

Sustained Released  
Fluoride Gel

## Description:

Flor-Opal® is a unique, sustained-release, 0.5% fluoride ion in a sticky, viscous gel to be used with a custom tray. Flor-Opal is a clear, nearly tasteless, high-viscosity sticky gel with a pH of ~6.5.

## Indications:


Flor-Opal is designed for use whenever topical fluoride application is desired via take-home tray (e.g., prevention of root caries, treatment of periodontal conditions, following bleaching procedures, root sensitivity).

## Procedure:


1. Read and understand instructions before using or dispensing to patients.
2. Fabricate tray to meet patient's needs. See laboratory instructions (page 2) or send the working cast/model and prescription order form to Ultradent. Areas of sensitivity should be indicated on the cast before sending the model. If patient already has a custom bleaching tray, instruct them to apply Flor-Opal in the same manner as the bleaching gel.  
*Note: Trays made only for Flor-Opal may be constructed without scalloping; however, one should scallop trays made for Opalescence® bleaching.*
3. Flor-Opal is dispensed in 1.2ml unit dose syringes. An application of a complete arch should use most of the contents of one unit dose syringe. Tray is loaded by running gel on underside of occlusal and incisal areas.
4. The length and number of times the tray is worn depends on the condition, the patient, and the clinician. Recommended treatment times generally range from 2 to 8 hours. Wearing the tray at night may be suggested since the gel generally stays active in the tray 8-10 hours because of slower muscle and salivary activity at night. Gel usually lasts 4-6 hours with daytime activity.

**Ultradent Products, Inc.**  
**Attn: Tray Fabrication**  
**505 West 10200 South**  
**South Jordan, Utah 84095**

5. Tray should be removed at meal times. Following tray removal, patient should brush and rinse with water. DO NOT swallow solution during rinsing. Wash tray and store in a tray storage case. Fresh gel should be used for each application.
6. Gel may be warmed before placing in tray to avoid thermal sensitivity.

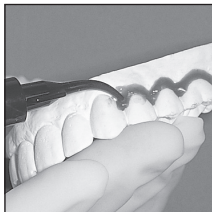

*Fig. 1*

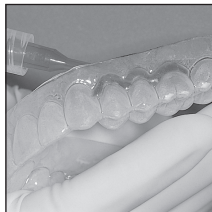

*Fig. 2*

### **Laboratory Instructions:**

1. Pour and trim cast as you would for a standard bleaching tray. Apply 0.5-1.0mm of Ultradent® LC Block-Out Resin to a clean, dry cast.
2. Cure LC Block-Out for ~2 minutes in a light curing unit. A hand-held intraoral light (Ultra-Lume®) can be used (approximately 20-40 seconds per tooth). Wipe off oxygen inhibition layer.
3. With vacuum former (Ultra-Form® or EconoForm™), heat a Sof-Tray® sheet until it sags ~1 inch. Activate vacuum and adapt softened plastic over mold. Cool and remove model.
4. Cut excess bulk of material away with Ultra-Trim™ scalloping scissors.
5. Trim excess tray material. Contour the tray margin to avoid frenum attachments, tori, and similar anatomical structures.
6. Return tray to model; check tray extensions. Gently flame polish edges one quadrant at a time (Blazer® Micro Torch).
7. While still warm, hold periphery of each segment firmly against model for 3 seconds with water-moistened finger. If an area is short of the desired length, gently heat and push the tray material to the desired location. If this material thins too much, a new tray should be fabricated.

### **Precautions:**

1. If any problems occur, have the patient discontinue treatment and notify the dentist.
2. Patients should not swallow large volumes of Flor-Opal gel. Excess at insertion and residue upon removal should be brushed off and rinsed; DO NOT swallow.
3. Keep out of heat and sunlight at all times. Flor-Opal should be stored at room temperature.
4. Not intended for use by pregnant women.

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**

Controlled Product Yes  No

**SECTION I - IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING**

Material Name <b>Flor-Opal<sup>®</sup></b>	Manufactured by Ultradent Products, Inc. 505 West 10200 South South Jordan, Utah 84095 USA
Material Use For treating tooth surfaces with fluoride.	Emergency Contact 1-800-552-5512 or 1-801-572-4200 (Outside USA)
Date July 17, 2006	EC Representative
Prepared by Richard Tuttle, D.D.S.	

**SECTION II - COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS**

Active Ingredients	Approximate Concentration %	LD <sub>50</sub> /LC <sub>50</sub> Specify Species and Route	C.A.S. N.A. or U.N. Numbers
Sodium Fluoride	1.1% w/w	LD <sub>50</sub> 52mg/kg Rat-Oral	7681-49-4

**SECTION III - HAZARDS IDENTIFICATION**

Adverse Human Effects and Symptoms Sodium fluoride in large dosages is toxic.

**SECTION IV - FIRST AID MEASURES**

Inhalation N/A	Eye Contact Flush with lots of water.
Skin Contact Wash with soap and water.	Ingestion Give large amounts of water or milk.

**SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES**

Flammability  If Yes, Under Which Conditions:  
Yes  No

Means of Extinction N/A	Protective Equipment for Firefighters N/A
----------------------------	--

**SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES**

Personal & Environmental Precautions  
N/A  
Methods for Cleaning  
Wipe up with cloth and water.

**SECTION VII - HANDLING AND STORAGE**

Handling Precautions  
N/A  
Storage Requirements  
Room Temperature.

**SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION**

Respiratory Protection N/A	Eye Protection Protective eyewear.
Hand Protection Latex gloves.	Skin Protection Lab coat.

**SECTION IX - PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES**

Appearance Clear bubbled gel.	Solubility in Water Completely.	Melting Point/Range Not defined.
Odor Neutral.	pH ~6.5	Other Data None.

**SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY**

Chemical Stability Conditions and Materials to Avoid  
Yes  No  Oxidants and strong acids.

Hazardous Decomposition Products  
N/A

**SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION**

Routes of Entry  Skin Contact  Skin Absorption  Eye Contact  Inhalation Acute  Inhalation Chronic  Ingestion

Effects and Symptoms of Short-Term Exposure  
Eyes: Irritation. Ingestion: Irritation.

Chronic Effects and Symptoms of Long-Term Exposure  
Eyes: Irritation. Ingestion: Irritation (if ingested in large quantities).

Sensitization  
Not defined.

Irritation of Product  
Slight.

**SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION**

Biodegradability  
Yes.

**SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS**

Method of Waste Disposal  
In accordance with governmental regulations.

Further Details  
None.

**SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION**

Not defined.

**SECTION XV - REGULATORY INFORMATION**

Not defined.


**SECTION XVI - OTHER INFORMATION**

FOR DENTAL USE ONLY. Use as directed.


The information and recommendations are taken from sources (raw material MSDS(s) and manufacturer's knowledge) believed to be accurate; however, Ultradent Products, Inc. makes no warranty with respect to the accuracy of the information or the suitability of the recommendation and assumes no liability to any user thereof. Each user should review these recommendations in the specific context of the intended use and determine whether they are appropriate.



Construct and dry the stone model, cutting palate and tongue areas out.

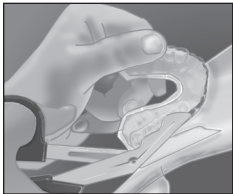

Vacuum adapt Sof-Tray® .035" sheet to model. Cool and separate.

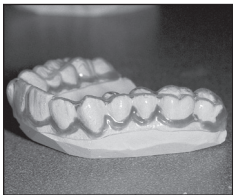

For sensitive roots use Ultradent's LC Block-Out Resin on gingival margin to provide a reservoir space for Flor-Opal. It is recommended to lap tray 2-3mm onto gingiva.

### General Precautions:


1. For professional use only.
2. Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment. Use only as directed.
3. Keep products out of heat/sunlight.
4. Avoid skin exposure to resins.
5. Isolate strong chemicals to area of treatment.
6. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
7. Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
8. Never force syringe plungers.
9. Clean and disinfect syringes between patients.




Load gel into your bleaching tray made by your dentist.  
Use 1/3 to 1/2 of syringe.



Brush teeth, then insert tray. Adapt tray sides to teeth.

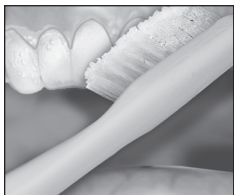


Remove excess gel with clean finger or soft toothbrush.  
Rinse twice; do not swallow rinses.

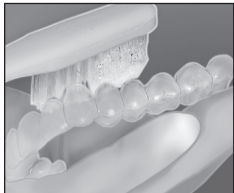

Clean tray with soft brush and cool tap water.  
Store tray in case provided.



Gipsmodell herstellen und trocknen lassen; Gaumen- bzw. Zungenpartie entfernen.

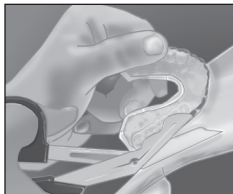

Sof-Tray®-Folie 0,035"/0,9 mm über das Modell tiefziehen. Abkühlen lassen und abziehen.



Bei empfindlichen Zahnhälsen vorher mit LC Block-Out Resin am Gingivalrand Reservoirs anlegen, damit dort etwas mehr Raum für Flor-Opal geschaffen wird. Zu empfehlen ist ein Überlappen der Schiene auf die Gingiva von 2-3 mm.

### Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:


1. Nur für professionelle Anwendungen.
2. Lesen Sie die Anleitungen, Warnungen und MSDS, bevor Sie mit der Behandlung anfangen. Bitte folgen Sie den Anleitungen genau.
3. Produkt nicht in die Sonne legen oder Hitze aussetzen.
4. Nicht auf die Haut auftragen.
5. Chemikalien nur auf die Behandlungsfläche auftragen.
6. Klären Sie vorab, ob Patienten allergisch auf Inhaltsstoffe reagieren.
7. Testen Sie den Ausfluss der Flüssigkeit aus der Spritze, bevor Sie das Produkt beim Patienten auftragen.
8. Die Spritze nicht mit Gewalt benutzen.
9. Reinigen und desinfizieren Sie Spritzen zwischen den Anwendungen.




Geben Sie das Gel in die Einlage, die Ihr Zahnarzt erstellt hat.  
Benutzen Sie 1/3 bis 1/2 der Spritze.



Putzen Sie Ihre Zähne, dann setzen Sie die Schiene ein und drücken sie an den Seiten an.

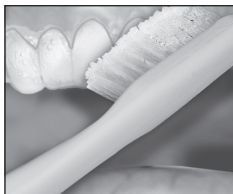


Entfernen Sie überschüssiges Gel mit einem sauberen Finger oder einer weichen Zahnbürste. Spülen Sie den Mund zweimal mit Wasser; das Mundspülwasser dabei nicht schlucken.

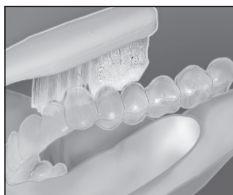

Reinigen Sie die Schiene mit einer weichen Bürste und kaltem Leitungswasser. Legen Sie sie in die Aufbewahrungsbox.



Couler le modèle, laisser sécher le plâtre, puis éliminer les parties centrales (linguales et palatines).

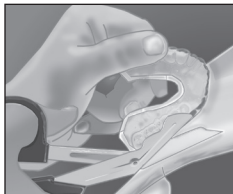

Procéder au thermoformage d'une plaque souple Sof-Tray<sup>®</sup> 0.9 mm. Laisser refroidir, puis séparer la gouttière du modèle.



Pour les racines sensibles, placer la résine d'espacement LC Block-Out au niveau gingival afin de créer les réservoirs au niveau des collets. Il est recommandé de recouvrir la gencive de 2 à 3 mm.

### Précautions générales:


1. Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
2. Revoyez les instructions, les précautions et les fiches toxicologiques avant de commencer le traitement. A utiliser uniquement selon les instructions.
3. Gardez les produits loin de la chaleur/de la lumière.
4. Evitez d'exposer la peau.
5. Isolez les produits chimiques forts à la zone de traitement.
6. Confirmez que le patient n'a pas d'allergies connues aux matériaux du traitement.
7. Testez le flux des matériaux sortant de la seringue et de l'embout avant de les utiliser intraoralement.
8. Ne forcez jamais sur le piston de la seringue.
9. Nettoyez et désinfectez les seringues entre chaque patient.




Chargez le gel dans le porte-empreinte de blanchiment fait par votre dentiste. Utilisez 1/3 à 1/2 de la seringue.



Se brosser les dents, puis insérer la gouttière. Adapter les bords de la gouttière contre les dents.

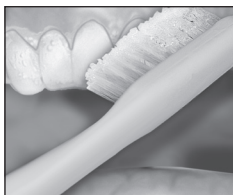


Enlever l'excès de gel au doigt ou à l'aide d'une brosse à dent souple. Rincer deux fois; ne pas avaler l'eau du rinçage.

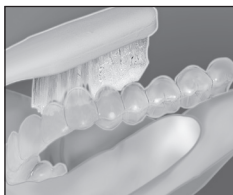

Nettoyer la gouttière avec une brosse à dent propre sous l'eau froide. Conserver la gouttière dans son étui.



Vervaardig een gipsmodel, snij het palatum en tonggebied uit.

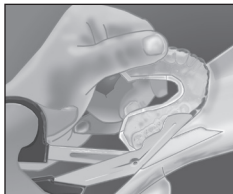

Trek een Sof-Tray® vel .035" vacuüm over het model. Laat afkoelen en verwijder.



Gebruik bij gevoelige worteloppervlakken Ultradent's LC Block-Out Resin op het gipsmodel ter plaatse van de gingivarand om een reservoir te creëren voor Flor-Opal. Het wordt aanbevolen om het lepelkje de gingiva 2-3 mm te laten overlappen.

### Algemene voorzorgsmaatregelen:


1. Uitsluitend voor professioneel gebruik.
2. Lees de gebruiksaanwijzing, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatiebladen (MSDS) voorafgaand aan de behandeling goed door. Gebruik het product uitsluitend zoals voorgeschreven.
3. Zorg dat het product niet aan hitte/zonlicht wordt blootgesteld.
4. Voorkom dat het product met de huid in aanraking komt.
5. Breng sterke chemicaliën alleen aan op de behandelingsplaats.
6. Controleer of de patiënt niet allergisch is voor de behandelingsmaterialen.
7. Test hoe het materiaal uit de spuit en punt stroomt voordat u het intraoraal toepast.
8. Druk de plunjer van de spuit nooit met kracht in.
9. Reinig en desinfecteer spuiten voordat u deze bij de volgende patiënt gebruikt.




Spuit de gel in de tandbleekvorm die door uw tandarts is gemaakt. Gebruik de helft of een derde van de hoeveelheid in de spuit.



Poets de tanden, breng dan de tray aan. Druk de zijkanten van de tray tegen de tanden aan.

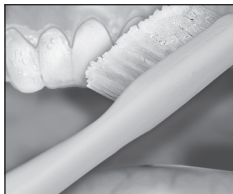


Verwijder de overmaat gel met een schone vinger of zachte tandenborstel. Spoel twee keer, niet inslikken.

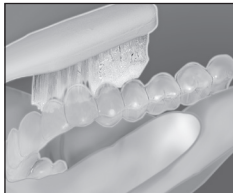

Maak de tray schoon met een zachte borstel en koud kraanwater. Bewaar de tray in het verstrekte doosje.



Preparare e asciugare il modello di gesso, squadrar via le aree della lingua e del palato.

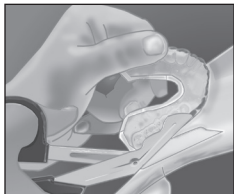

Termoformare un foglio Sof-Tray® da 0,9mm sul modello. Lasciar raffreddare quindi separare.



Nel caso di radici sensibili applicare la resina Ultradent LC Block-Out sui margini gengivali in modo da creare un serbatoio per il Flor-Opal E' consigliabile che la mascherina si estenda per 2-3mm sulla gengiva.

### Precauzioni Generali:


1. Solo per uso professionale.
2. Leggere le istruzioni, le precauzioni e il Foglio di Sicurezza Materiali prima di iniziare il trattamento. Usare solo secondo le istruzioni.
3. Tenere i prodotti lontano dalle fonti di calore e dalla luce del sole.
4. Evitare il contatto con la pelle.
5. Tenere i prodotti chimici lontani dalle aree dove si svolge la terapia.
6. Confermare che il paziente non ha allergie conosciute ai materiali utilizzati per la terapia.
7. Provare il flusso dei materiali dalla siringa e dalla punta prima di usarli per via intraorale.
8. Non forzare mai lo stantuffo della siringa.
9. Pulire e disinfettare le siringhe tra un paziente ed un altro.




Inserire il gel nel vassoio da sbiancamento preparato dal dentista. Usare una quantità compresa tra 1/3 e 1/2 della siringa.



Spazzolatevi i denti, quindi inserite il cucchiaino. Adattate i bordi del cucchiaino ai denti.

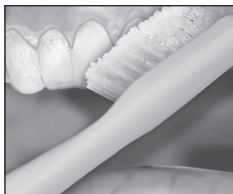


Togliete il gel in eccesso con un dito pulito o con uno spazzolino da denti morbido. Sciacquate due volte evitando di inghiottire gli sciacqui.

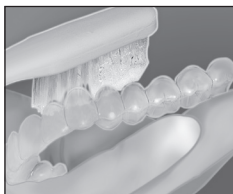

Pulite il cucchiaino con uno spazzolino morbido e acqua corrente tiepida. Conservate il cucchiaino nell'astuccio fornitovi.



Construya y seque el modelo de yeso, recortando las áreas del paladar y la lengua.

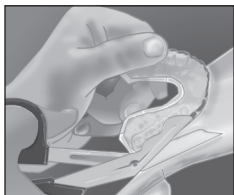

Con aspiración, adapte la hoja Sof-Tray<sup>®</sup> .035" al modelo. Enfríe y separe.



Para raíces sensitivas, utilice la resina LC Block-Out en el margen gingival a fin de proveer espacio de reserva para Flor-Opal. Se recomienda que la cubeta cubra la encía de 2 a 3 mm.

### Precauciones Generales:


1. Sólo para uso profesional.
2. Revise las instrucciones, precauciones y la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de iniciar el tratamiento. Úselo solamente de la manera indicada.
3. Mantenga estos productos alejados del calor y de la luz solar.
4. Evite la exposición de la piel.
5. Aísle los químicos fuertes del área de tratamiento.
6. Asegúrese de que el paciente no sufra de alergias conocidas a los materiales del tratamiento.
7. Realice una prueba de flujo de los materiales de la jeringa y la punta antes de usar de manera intraoral.
8. Nunca fuerce el émbolo de la jeringa.
9. Limpie y desinfecte las jeringas entre los pacientes.




Coloque el gel en su cubeta de blanqueamiento hecha por su dentista. Utilice una jeringa de 1/3 a 1/2.



Cepille los dientes y luego inserte la cubeta. Adapte los costados de la cubeta a los dientes.

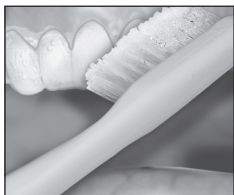


Quite el exceso de gel con un dedo limpio o con un cepillo de dientes suave. Enjuague dos veces; no se debe tragar el agua.

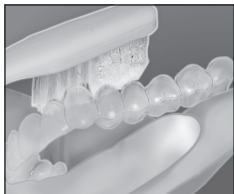

Limpie la cubeta con un cepillo de dientes suave y agua fría del grifo. Guárdela en el estuche.



Vaze os moldes a gesso e corte o palato e o pavimento da boca.

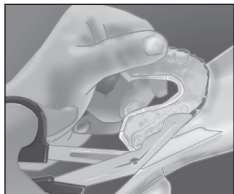

Coloque uma placa .035" Sof-Tray<sup>®</sup> sobre o modelo e leve ao vácuo. Arrefeça e separe.



Para raízes sensíveis utilize a resina LC Block-Out na margem gengival de modo a prever espaço suficiente para o Flor-Opal. É recomendado que a moldeira cubra 2-3mm de gengiva.

### Precauções gerais:


1. Destina-se apenas à utilização profissional.
2. Rever as instruções, precauções e as fichas de segurança do produto antes de iniciar o tratamento. Utilizar apenas conforme indicado.
3. Manter fora do calor/luz solar.
4. Evitar a exposição à pele.
5. Isolar a área de tratamento contra químicos fortes.
6. Confirmar que o paciente não tem alergias conhecidas aos materiais de tratamento.
7. Testar o fluxo dos materiais da seringa e da ponta antes de utilizar intraoralmente.
8. Nunca forçar o êmbolo da seringa.
9. Limpar e desinfetar as seringas entre cada paciente.




Colocar o gel na moldeira de branqueamento preparada pelo seu dentista. Utilizar 1/3 a 1/2 da seringa.



Lavar os dentes e inserir a moldeira. Adaptar as margens da moldeira aos dentes.

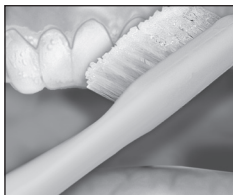


Remover o excesso de gel com dedos limpos ou uma escova de dentes macia. Enxaguar duas vezes, não engolir.

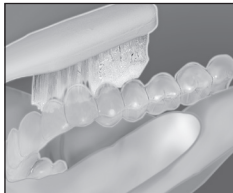

Limpar a moldeira com uma escova macia e água fresca. Guardar a moldeira no porta moldeira.



Framställ och torka gipsmodell, skär bort gom och tung områden.

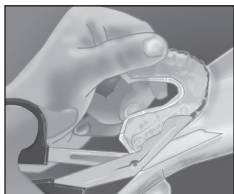

Vakumforma Sof-Tray® 0.9mm platta över modellen.  
Låt kallna och dra av skenan.



För känsliga tandhalsar, använd Ultradent's LC Block-Out Resin cervikalt på modellens tänder för att skapa resovoarer för Flor-Opal. Överlappa skenan 2-3 mm upp på gingivan.

### Generella försiktighetsåtgärder:


1. Endast för yrkesmässigt bruk.
2. Gå igenom instruktioner, varningar och varuinformation (MSDS) innan behandlingen påbörjas. Använd endast produkten enligt anvisningarna.
3. Produkterna ska hållas borta från hetta/solljus.
4. Undvik hudkontakt.
5. Begränsa starka kemiska medel till behandlingsområdet.
6. Bekräfta att patienten inte har några kända allergier mot behandlingsmaterial.
7. Kontrollera att materialet flödar mellan sprutan och spetsen före intraoral användning.
8. Tvinga aldrig sprutkolven.
9. Rengör och desinficera sprutor mellan patienter.




Ladda gel i blekskenan som förberetts av din tandläkare.  
Använd 1/3 till 1/2 av sprutan.



Borsta tänderna, sätt in skeden. Tryck lätt skedens sidor mot tänderna.

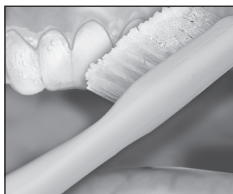


Avlägsna överskott av gel med ett finger el. en mjuk tandborste.  
Skölj mun med vatten ett par gånger.

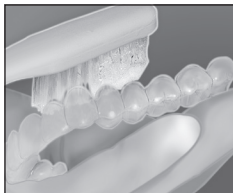

Rengör skeden med mjuk borste och kallt vatten.  
Förvara i medföljande ask.



Fremstil en gipsmodel uden gane og tungeområderne.  
Lad modellen tørre.

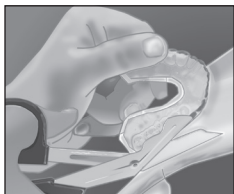

Adapter en Sof-Tray® Regular plade til modellen med en  
Vakuumformer (fx. UltraVac). Afkøl og adskil.



Ved følsomme tandhalse anvendes Ultradent's LC Block-Out Resin  
langs gingiva på modellen for at skabe ekstra plads til  
Flor-Opal. Det anbefales at lade skinnen overlappe gingiva 2-3mm.

### Generelle forholdsregler:


1. Må kun anvendes af tandlægepersonale.
2. Læs vejledningerne, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladene, inden behandlingen påbegyndes. Må kun anvendes som angivet.
3. Produkterne skal holdes væk fra varme/sollys.
4. Undgå hudkontakt.
5. Isolér stærke kemikalier til behandlingsområdet.
6. Bekræft, at patienten ingen kendte allergier har overfor behandlingsmaterialerne.
7. Afprøv materialeudstrømningen fra sprøjte og spids inden intraoral brug.
8. Sprøjtestemplet må aldrig forceres.
9. Rengør og desinficér sprøjterne imellem hver patient.




Fyld gelen i den blegeskinne, der er fremstillet af din tandlæge.  
Brug 1/3 til 1/2 af sprøjten.



Børst tænderne og sæt skinnen med gel på plads.  
Tryk skinnens sider let mod tænderne.

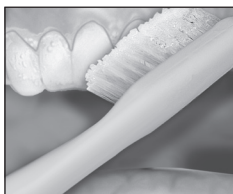


Fjern overskydende gel med en finger eller en blød tandbørste.  
Skyl munden med vand et par gange.  
Spyt ud ~ Synk ikke!

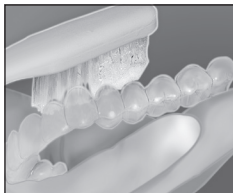

Rengør skinnen med en blød børste og koldt, rindende vand.  
Brug den udleverede æske til opbevaring af skinnen.



Valmista kipsimallit ja anna niiden kuivua, poista kipsimallista palatinaaliset ja linguaaliset osat.

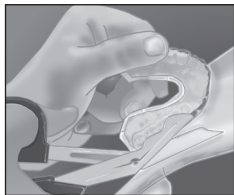

Aseta Sof-Tray® 0.035"-muovikalvo kipsimallien päälle ja vakumoi se. Jäähdytä ja irrota.



Herkkiä juurenpintoja varten käytä Ultradentin LC Block-Out –resiiniä ienrajan kohdalla, jotta saisit tilaa Flor-Opal –geelille. Lusikan reunojen tulisi ylettyä 2-3 mm ikenen päälle.

### Yleiset ohjeet:


1. Vain ammattikäyttöön.
2. Lue ohjeet ja varoimia koskevat kohdat sekä käyttöturvalisuuksiedote ennen hoidon aloittamista. Käytä vain ohjeissa mainitulla tavalla.
3. Suojaa tuote kuumudelta ja auringonvalolta.
4. Vältä ihokosketusta.
5. Käsiteltävän alueen ulkopuoliset alueet pitää suojata väkevilta kemikaaleilta eristämällä.
6. Varmista, ettei potilas ole allerginen hoidossa käytettävillä materiaaleille.
7. Varmista, että materiaalit virtaavat vapaasti ruiskun kärjestä ennen suunsisäistä käyttöä.
8. Älä koskaan pakota ruiskujen mäntiä.
9. Puhdista ja desinfioi ruiskut potilaskohtaisen käytön jälkeen.




Levitä geeliä hammaslääkärin valmistamaan valkaisulusikkaan.  
Käytä 1/3 – 1/2-ruiskullista.



Harjaa hampaat ja aseta muotti paikoilleen.  
Paina kevyesti muotin reunoja hampaita vasten.

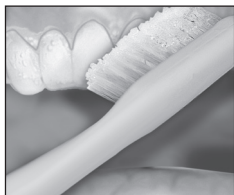


Poista ylimääräinen geeli puhtaalla sormella tai pehmeällä  
hammasharjalla. Huuhtelee suu pari kertaa; älä niele huuhteluvettä.

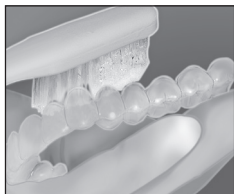

Puhdista muotti pehmeällä harjalla ja kylmällä vedellä.  
Säilytä muotti mukana tulevassa säilytyslaatikossa.



Κατασκευάστε ένα γυψίνο εκμαγείο και κόψτε την υπερώο / γλωσσική περιοχή.

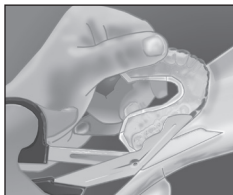

Προσαρμόστε με τη συσκευή κενού ένα φύλλο Sof-Tray<sup>®</sup> .035” στο εκμαγείο. Μετά την ψύξη του απομακρύνετέ το.



Για ευαίσθητες ρίζες χρησιμοποιείστε τη ρητίνη Ultradent's LC Block-Out Resin ώστε να δημιουργήσετε χώρους για reservoir για το Flor-Opal. Σας συνιστούμε να επεκτείνετε το νάρθηκα 2-3 mm πάνω στα ούλα.

#### Γενικές προφυλάξεις


1. Μόνο για επαγγελματική χρήση.
2. Διαβάστε τις οδηγίες, τις προφυλάξεις και το Φύλλο Οδηγιών Ασφαλείας πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του.
3. Διατηρήστε τα προϊόντα μακριά από θερμότητα/ηλιόφως.
4. Αποφύγετε την έκθεση του δέρματος στα προϊόντα.
5. Απομονώστε τις ισχυρές χημικές ουσίες στην περιοχή θεραπείας.
6. Επιβεβαιώστε ότι ο/η ασθενής δεν είναι αλλεργικός/ή στα υλικά θεραπείας.
7. Εκτελέστε δοκιμή της ροής υλικών από τη σύριγγα και το άκρο πριν τα χρησιμοποιήσετε εντός της στοματικής κοιλότητας.
8. Μη σπρώχνετε ποτέ το έμβολο της σύριγγας.
9. Καθαρίστε και απολυμάνετε τις σύριγγες μετά από κάθε χρήση σε ασθενή.




Φορτώστε το ζελέ στο δίσκο λεύκανσης που έχει κατασκευαστεί από τον οδοντίατρό σας. Χρησιμοποιήστε το 1/3 έως 1/2 της σύριγγας.



Βουρτσίστε τα δόντια σας και έπειτα τοποθετείστε τον νάρθηκα. Προσαρμόστε τις πλευρές του νάρθηκα στα δόντια.

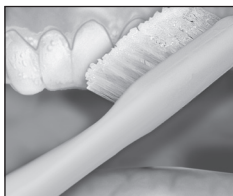

Απομακρύνετε τις περίσσειες του ζελέ με καθαρό δάκτυλο ή με μαλακή οδοντόβουρτσα. Ξεπλύνετε δύο φορές χωρίς να καταπιείτε.

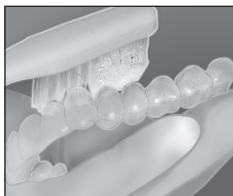

Καθαρίστε τον νάρθηκα με μαλακή βούρτσα και κρύο νερό από την βρύση. Φυλάξτε τον νάρθηκα στην ειδική θήκη.



Legend:  
Legende:  
Légende:  
Legende:

Legenda:  
Leyenda:  
Legenda:  
Teckenförklaring:

Forklaring:  
Merkkien selitykset:  
Υπόμνημα



Use by date

Verfalldatum

A utiliser avant le

Uiterste gebruiksdatum

Non riutilizzare

Use antes de la fecha de expiración

Utilize por data

Förbrukningsdatum

Användes inden

Viimeinen käyttöajankohta

Χρησιμοποίηση έως



See instructions

Siehe Anleitung

Voir le mode d'emploi

Zie gebruiksaanwijzingen

Vedere le istruzioni

Veá las Instrucciones

Ver instruções

Se bruksanvisning

Se vejledningen

Lue käyttöohjeet

**Δείτε τις οδηγίες**

**LOT**

Batch Code

Liefercode

Code de lot

Partijcode

Codice del lotto

Código del Lote

Código do lote

Batchkod

Batchkode

Eräkoodi

**Κωδικός παρτίδας**



Keep out of reach of children

Von Kindern fernhalten

A garder hors de la portée des enfants

Buiten het bereik van kinderen houden

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Manténgase fuera del alcance de los niños

Mantenha fora do alcance das crianças

Förvaras utom räckåll för barn

Opbevares utilgængeligt for børn

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta

**Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά**

Not for injection.

Nicht zur Injektion.

Ne pas injecter.

Niet injecteren.

Non per iniezione.

No debe inyectarse.

Não injectar.

Ej för injektion.

Ikke til injektion.

Ei injektioikäyttöön.

**Μη ενέσιμο.**



Recommended Storage Temperature

Bei °C lagern

Température de stockage recommandée

Aanbevolen bewaartemperatuur

Temperatura di conservazione suggerita

Temperatura de Almacenamiento Recomendada

Temperatura de armazenamento recomendada

Rekommenderad förvaringstemperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur

Suosittelava säilytyslämpötila

**Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης**

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

## Flor-Opal

Flammability		HAZARD RATING	
	0		4 = Severe
Health	1	1	3 = Serious
		Reactivity	2 = Moderate
			1 = Slight
			0 = Minimal

### **MSDS Included.**

---

For professional use only.  
U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.  
Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line,  
refer to Ultradent's catalog or call Toll Free **1-800-552-5512**.  
Outside U.S. call (801) 572-4200  
or visit [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).

© Copyright 2006 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.  
U.S. Patent Nos.: 5,234,342; 5,667,386; 5,759,037; 5,846,085; 5,851,512; 5,855,870; 5,985,249; 6,036,943; 6,086,855.  
Other U.S. and International Patents Pending.

---

Ultradent Products, Inc.  
505 West 10200 South,  
South Jordan, Utah 84095, USA

 **ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

#10115.3 070706