

**MSDS Not Required.**

HAZARD RATING 4 = Severe 3 = Serious 2 = Moderate 1 = Slight 0 = Minimal

**Key:**



Use By Date



See Instructions



Batch Code



Catalog Number



Do Not Reuse to Avoid Cross Contamination

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

InterGuard®


**Description & Indications:**

InterGuard® is a preventive aid for operative dentistry. It is used to protect adjacent teeth from iatrogenic preparation damage. InterGuard is designed for autoclave and dry heat sterilization. Made of stainless steel with a curl at each end, InterGuard fits snugly in both large and small interproximal spaces. InterGuard is available in two heights:

- 4.0mm for short anatomical crowns.
- 5.5mm for tall anatomical crowns.

**Procedure:**

1. To prevent patient from accidentally swallowing InterGuard use a rubber dam or fasten a piece of dental floss through the hole on the side of InterGuard. To aid in retrieval make sure that the floss hangs no less than 7-inches outside of mouth.
2. Adjust the space between the curls with your fingers to allow InterGuard to fit firmly between the teeth.
3. Place InterGuard with curls toward the tooth to be prepared (Fig. 1). The curls keep the InterGuard clear of the transition angles, allowing full access to the area to be prepared.
4. With tight proximal contacts, use wedges to simplify placement or separate with a retaining ring.  
Note: At the end of preparation, InterGuard will loosen. If necessary, stabilize with a finger or InterGuard may be stabilized during the entire procedure with a retaining ring (in this case turn curls away from the tooth being prepared).

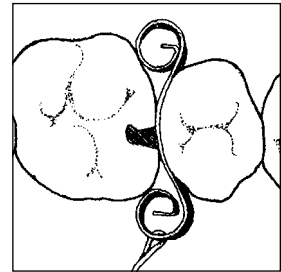

**Fig. 1** Place InterGuard curls toward the tooth to be prepared.

**Precautions:**

1. Always isolate the preparation area with a rubber dam or ligate InterGuard with a 7-inch length of dental floss to prevent aspiration.
2. For professional use only.

U.S. Federal law restricts the sale of this device by or on the order of a state licensed dental professional.  
For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free **1-800-552-5512**.  
Outside U.S. call (801) 572-4200.


International Patents: Switzerland 122242, Denmark MR 0797 1995, Norway 72676, Sweden 59190, Germany M 9603438.2

800.552.5512 ULTRADENT.COM

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2010 Ultradent Products, Inc./InterGuard ApS. All Rights Reserved.  
Manufactured for Ultradent Products Inc. Made in Denmark 65432.8 101210

# InterGuard®

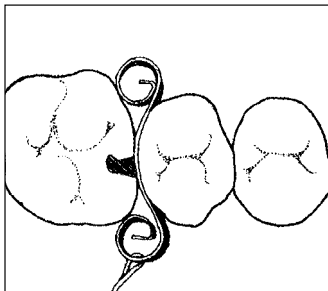

**English**

To prevent aspiration, use rubber dam or dental floss (18cm).

Place the InterGuard between teeth. Adjust the curls for a firm fit. With tight proximal contact, separate with a wedge or a retaining ring

Place InterGuard with curls turned to tooth being prepared.

At the end of the preparation InterGuard will loosen. If necessary stabilize with a finger or stabilize during the whole procedure with a retaining ring (in this case turn the curls away from the preparation). Do not reuse to avoid cross contamination.

**German**

Um Aspiration zu vermeiden, verwenden Sie Kofferdam oder Zahnseide (ca. 18 cm).

Legen Sie den InterGuard zwischen die Zähne. Passen Sie die gerollten Seiten so an, dass der Schutz gut sitzt. Wenn er zu fest sitzt, halten Sie ihn mit einem Keil oder einem Sicherungsring auseinander.

Legen Sie die gerollten Seiten des InterGuards an den präparierten Zahn an.

Am Ende der Präparation löst sich der InterGuard. Stabilisieren Sie ihn ggf. mit einem Finger oder während der gesamten Behandlung mit einem Sicherungsring (in diesem Fall sollten die gerollten Seiten von der Präparation weg zeigen). Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.

**French**

Afin d'éviter l'aspiration, utiliser la digue en caoutchouc ou le fil dentaire (18cm).

Mettez l'InterGuard entre les dents. Réglez les bords roulés pour un maintien fixe. Lors d'un contact proximal serré séparez avec une clavette ou un anneau de retenue.

Mettez l'InterGuard avec les bords roulés tournés vers la dent en train d'être préparée.

En fin de préparation l'InterGuard se desserrera. Si besoin est, stabilisez-le avec un doigt ou pendant toute la procédure avec un anneau de retenue (dans ce cas, orientez les bords roulés à l'opposé de la préparation). Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.

**Dutch**

Gebruik om slikken te voorkomen, cofferdam of ca. 18 cm dental floss.

Plaats de InterGuard tussen de tanden. Stel de krullen bij zodat deze stevig vastzitten. Maak onder stevig proximaal contact een scheiding met een wig of een borgring.

Plaats de InterGuard met de krullen gedraaid naar de tand die wordt voorbereid.

Na afloop van de voorbereiding zal de InterGuard loskomen. Stabiliseer, indien nodig, met een vinger of stabiliseer gedurende de gehele procedure met een borgring (draai in dat geval de krullen weg van de voorbereiding). Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.

**Swedish**

För att förhindra sväljning, använd kofferdam eller 18 cm tandtråd.

Placera InterGuard mellan tänderna, justera vecken så att optimal passning uppnås. Vid tät proximal kontakt; Separera med en kil eller en sektionmatis-ring.

Placera InterGuard med vecken mot tanden, som skall behandlas.

Mot slutet av behandlingen tenderar InterGuard att lossna. Om så behövs, stötta med a finger eller stabilisera med ett matisband under hela proceduren (vänd i så fall vecken ifrån tanden som behandlas). För undvikande av korskontaminations för produkten inte ter användas.

**Italian**

Per prevenire l'aspirazione usare la diga di gomma o il filo interdentale (18cm).  
BARRIERA INTERPROSSIMALE

Posizionare l'InterGuard tra i denti. Regolare le parti curve per un fissaggio migliore. Qualora ci fosse un contatto prossimale stretto, separare con un cuneo o con un anello di ritenzione.

Posizionare l'InterGuard con le parti curve girate verso il dente che deve essere preparato.

Alla fine della preparazione, l'InterGuard si smollerà. Se necessario, stabilizzare con un dito o stabilizzare durante l'intera procedura con un anello di ritenzione (in questo caso, girare le parti curve dall'altro lato rispetto alla preparazione). Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.

**Danish**

Undgå aspiration: Brug kofferdam eller bind et stykke tandtråd (18 cm) InterGuard.

Juster afstanden mellem spiralerne for at opnå god retention. Ved tæt kontakt separer med en kil eller en sektioningsring.

Placer InterGuard, så spiralerne vender mod den tand, der skal præpareres.

InterGuard løsner sig ved slutningen af præparationen. Stabiliser eventuelt med en finger eller fastgør den fra start med en sektioningsring (idet tilfælde vendes spiralerne væk fra tanden, der præpareres). Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.

**Spanish**

Para prevenir la aspiración, utilice un dique de goma o hilo dental (18cm).

Coloque el InterGuard entre los dientes. Ajuste los lados retorcidos para que se fijen firmemente. Con el contacto cercano ajustado, separe con una cuña o un anillo de contención.

Coloque el InterGuard con los lados retorcidos mirando hacia el diente que se está preparando.

Al final de la preparación, InterGuard se aflojará. Si es necesario, asegure con un dedo o asegure durante el procedimiento completo con un anillo de contención (en este caso doble los lados retorcidos hacia el lado contrario a la preparación). No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.

**Finnish**

Ehkäistäkseen nieluun joutumista käytä kofferdamia tai hammaslankaa (18 cm).

Aseta InterGuard hampaiden väliin. Säädä kiharat siten, että ne sijaitsevat tiukasti kofferdamia vasten. Jos hampaiden proksimaalinen väli on ahdas, levitä kiilalla tai pidäkerenkaalla.

Aseta InterGuard siten, että kiharat osat tulevat preparoitaviin hampaisiin päin.

Preparoinnin lopulla InterGuard irtaoo. Tue tarvittaessa sormella tai koko toimenpiteen ajan pidäkerenkaalla (käynnä tässä tapauksessa kiharat pois päin preparoitavasta hampaasta). Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.

**Portuguese**

Para evitar aspiração, use dique de borracha ou fio dentário (18cm).

Coloque o InterGuard entre os dentes. Ajuste entre os porta matriz para um perfeito ajuste. Com uma contacto proximal apertado separe com uma cunha ou com uma matriz metálica.

Coloque o InterGuard com o porta matriz virado para o dente a ser preparado.

No final da preparação InterGuard desprender-se-á. Se necessário estabilize com um dedo ou estabilize durante todo o processo com uma matriz metálica (neste caso coloque os porta matriz afastados a preparação). Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.

**Greek**

Για να προφυλαχθεί από πιθανή αναρρόφιση χρησιμοποιήστε ελαστικό χρησιμοποιήστε ή οδοντικό νήμα. (18cm).

Τοποθετήστε το InterGuard μεταξύ των δοντιών. Προσαρμόστε τις σπυροφές για σταθερή εφαρμογή. Σε σφιχτή άμεση επαφή διαχωρίστε με μια σφήνα ή ένα διακτύλιο συγκράτησης.

Τοποθετήστε το InterGuard με τις σπυροφές στραμμένες προς το δόντι το οποίο προετοιμάζεται.

Το InterGuard χαλαρώνει μετά το πέρας της προετοιμασίας. Εάν χρειάζεται σταθεροποιήστε με το δάκτυλο ή σταθεροποιήστε χαλάκι τη διάρκεια της διαδικασίας με ένα διακτύλιο συγκράτησης (σε αυτή την περίπτωση στρέψτε τις σπυροφές μακριά από την προετοιμασία). Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωτική μόλυνση.